

## Solaris Air Compressor


品番: 65-0003 (230v) | 65-0004 (110v)



### 説明

Peak ScientificのSolaris Air Compressorジェネレーターは、高品質の空気を外部から供給することなく、実験室でELSD用のSolaris窒素ジェネレーターをサポートするように設計されています。230vと110vの両方のオプションがあり、このユニットはすべての地域に適しています。Peakのすべての製品に共通する機能は、実験室の作業者が使いやすく、分析に集中できることです。このユニットは、積み重ね可能な設計によって貴重な実験室の作業スペースの使用を制限するように設計されており、Solaris ELSD窒素発生器はコンプレッサーの上に積み重ねることができます。Solarisは、HPLC(高速液体クロマトグラフィー)を使用するラボ用のELSD(蒸発光散乱検出器)用の高純度窒素のオンサイトガス供給を提供するために、または代わりにコンパクト質量分析計機器を提供するために開発されました。

- **ガスの種類** 空気
- **統合型コンプレッサ:** はい

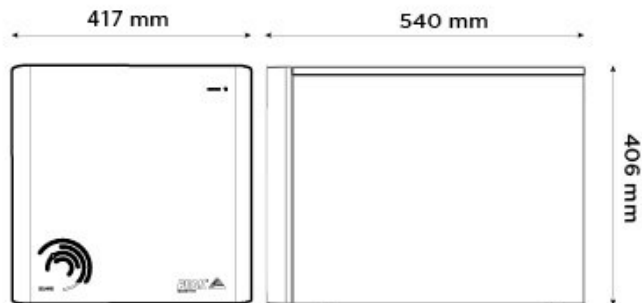

### 主な機能

- 可変の出口流量、圧力、純度
- ELSDのUHP窒素、最大10 L / min、100 psi、最大99.5%の純度
- コンパクトなベンチトップフォームファクタ、個別の美的スタイル
- 色を示すLED照明でステータスを簡単に認識
- オプションのSolaris Air Compressorスタックブルモジュール
- 信頼できる実績のある既存のテクノロジーに基づいて設計されている
- 英国で最高の仕様で製造およびテストされ、CE / FCC認定
- 12か月の包括的なオンサイト保証

## 技術仕様

Solaris Air Compressor	
ガスの種類	空気
最大ガス流量:	VariousL/min
最大出口圧力:	120psi/8.3bar
最大出口圧力:	120psi/8.3bar
ガス出口の設定:	1 x 1/4" BSPP
消費電力:	1150
電圧:	230 ± 10% VAC
周波数:	50 / 60 Hz
電流:	(100v) 5 Amps / (230v) 2.3-2.7/3.2 Amps
熱出力:	2420 (BTU)
大きさ (高さx幅x奥行き) ミリメートル	406 x 417 x 540 mm
大きさ (高さx幅x奥行き) インチ	16 x 16.4 x 21.3 inches
装置の重量	42kg / 92.4lbs

# [PEAK Protected]<sup>TM</sup>

Peak Scientific のガス発生装置は、世界中の研究所における信頼性、利便性および性能のベンチマークとなっており、2年間の保証\* が付いています。ただし、この期間を経過した後も、当社の包括的な発生装置保証契約[**Protected**]によって引き続き製品は保護されます。

当社の世界クラスのアフターケアサポートパッケージは、お客様に合うようにスケジュールされた定期的な予防保守プログラムを提供すると同時に、世界中のテクニカルサポートへのインスタントアクセスと、万一の故障の際には優先的なオンサイトサービスを受けられるという安心感を提供します。

- 部品の注文については、以下をご覧ください。 [www.peakscientific.com/ordering/](http://www.peakscientific.com/ordering/)
- サービスプランについては、以下をご覧ください。 [www.peakscientific.com/service/service-plans/](http://www.peakscientific.com/service/service-plans/)

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

**Peak Scientific UK**  
Tel: +44 (0)141 812 8100  
Fax: +44 (0)141 812 8200

**ピークサイエンティフィックジャパン株式会社**  
Tel: 03-6864-0468

世界中の私たちの完全なリストについては  
オフィスの場所については、以下をご覧ください。

Web: [www.peakscientific.com](http://www.peakscientific.com)  
Email: [discover@peakscientific.com](mailto:discover@peakscientific.com)



0003