

Precision Hydrogen Trace 1200


水素 発生

品番: 3301768



説明

Precision Hydrogen Trace 1200ジェネレーターは、主にGCキャリアガス用に設計されており、FIDやFPDなどの水素燃料ガスを必要とする検出器にも使用できます。1つのジェネレーターで複数のGC機器に供給できます。このジェネレーターは、GCキャリアガスに水素を使用するユーザーに安全で信頼性の高い便利なソリューションを提供し、プロトン交換膜を利用して脱イオン水から水素ガスを生成することにより、Precisionシリーズから最高純度の水素を生成し、圧カシング吸収を実現します。モレキュラーシーブテクノロジーにより、水分を微量レベルまで除去します。Precision Hydrogen Traceジェネレーターは、ICP-MSに衝突ガスを供給するのにも適しています。プレシジョンハイドロジェントレース1200ジェネレーターには、多くの非常に堅牢な安全機能が標準装備されており、実験室での安心と、シリンダーガスに代わるはるかに安全で信頼性の高い、より便利な代替手段を提供します。

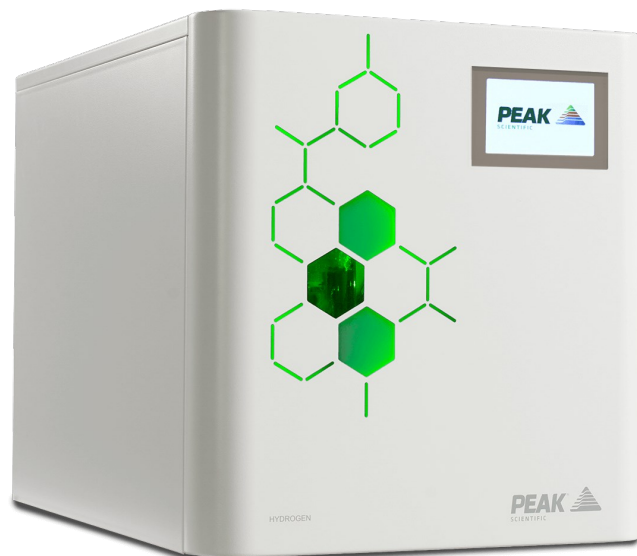


Generator Details

- **ガスの種類:** 水素
- **統合型コンプレッサ:** 番号

主な機能

- 火炎ガスおよび痕跡検出限界のキャリアガスに適している
- 99.99999%の純度
- 自動シャットダウン機能を備えた内部リーク検出
- 水素を安全かつ確実に生成する実証済みのPEMテクノロジー
- 最高レベルの純度を保証する再生PSAドライヤー
- 自動ローディングポンプを標準装備
- メンテナンスは脱イオン化カートリッジの交換に限定されます
- コンパクトで省スペースのモジュール設計
- オンデマンドで水素を生成し、システム内の水素の貯蔵を最小限に抑える
- 短時間で簡単な起動およびシャットダウン手順
- 複数のユニットを組み合わせ、より高いフロー要件を実現する
- GCオープン内水素リークディテクターはオプションの追加パーツとして利用可能
- 12か月の包括的なオンサイト保証
- Peakは、この発電機を標準として3年間のセル保証も提供しています

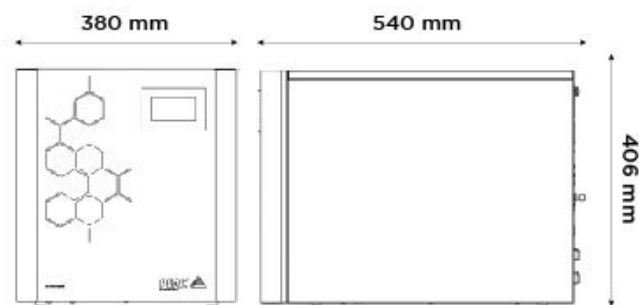

技術仕様

	Precision Hydrogen Trace 1200 水素発生
ガスの種類	水素
最大ガス流量:	1200 *cc/min
最大出口圧力:	100psi/6.9bar
最大出口圧力:	100psi/6.9bar
最高純度:	99.99999% *
ガス出口の設定:	1 x 1/8" Swagelok compression fitting
水質要件:	ASTM Type II (<1 µS/cm / >1 MΩ-cm)
水消費量:	up to 2.1 L/Day
消費電力:	787 Watts
電圧:	110 / 230
周波数:	50 / 60
電流:	10 Amps Max
熱出力:	1000
動作時の最高温度:	35°C / 95°F
認証:	CE, FCC, CSA
大きさ (高さx幅x奥行き) ミリメートル	406 x 380 x 540 mm
大きさ (高さx幅x奥行き) インチ	16 x 15 x 21.3 inches
装置の重量	31.5kg / 69.3lbs

*すべての流量は273.15Kおよび1.01barでscmで示されています **英国国立物理研究所によって独自に検証されたO2含有量に基づく

[PEAK Protected]TM

Peak Scientific gas generators define the benchmark in reliability, convenience and performance in laboratories around the world, and come backed with a 12 month warranty. Beyond this period however you can ensure that your investment continues to be **[Protected]** by our comprehensive generator care cover.

Our world-class aftercare support packages deliver a program of scheduled preventative maintenance whilst giving you the reassurance of instant access to worldwide technical support and priority on-site response in the untimely event of a breakdown.

- For ordering parts visit: www.peakscientific.com/ordering/
- For service plans visit: www.peakscientific.com/service/service-plans/

Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific North America
Tel: +1-800-767-6532
Fax: +1-978-608-9503

Peak Scientific China
Tel: +86 21 5079 1190
Fax: +86 21 5079 1191
For a full list of our worldwide office locations, please visit:
Web: www.peakscientific.com
Email: discover@peakscientific.com

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

